



MEMBER OF THE NYNOMIC GROUP


Eine Auswahl unserer OEM-Komponenten als Basis für eine schnelle und effiziente Produktentwicklung

Steuerung und Software

Optische Messtechnik und hochintegrierte Elektronik sind die Stärken von m-u-t. Unser Know-how in der Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik bringt uns in die Lage, für jede Applikation die optimale Steuerungsplattform auszuwählen oder zu entwickeln.

Unsere Steuerungsplattform für den Bereich Laborautomation ist eine flexibel einsetzbare zentralisierte und modular aufgebaute Plattform. Sie basiert auf National-Instruments-Hardware mit verschiedenen möglichen Schnittstellen (CanOpen, Ethernet etc.) und der Programmierung mit Labview. Durch einfache Funktionsupdates und Anpassungen für neue Geräteentwicklungen ist diese Plattform für die typischen Anwendungen im Bereich Laborautomation bei kleinen bis mittleren Stückzahlen optimal geeignet.

Unser Modular Logic Controller (MLC) ist eine modulare Steuerung für Hutschienenmontage, bestehend aus einer Zentraleinheit und bis zu 15 I/O-Modulen, die zur Realisierung einfacher Applikationen beliebig kombiniert werden können. Der modulare Aufbau ermöglicht Ihnen eine einfache Anpassung an Ihre unterschiedlichen Anforderungen mit entsprechender Ausbaureserve. Es sind unterschiedliche I/O-Module mit digitalen und analogen Ein- sowie Ausgängen verfügbar. Die I/O-Module können auf Ihre speziellen Anforderungen angepasst werden. Die Programmierung des MLC erfolgt mit Multiprog © der Firma PHOENIX CONTACT Software GmbH nach IEC 61131 in bis zu fünf unterschiedlichen Programmiersprachen.

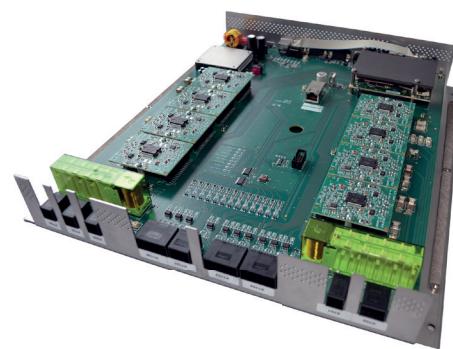

m-u-t GmbH
Am Marienhof 2
22880 Wedel
Germany

☎ +49 4103 9308 - 0
☎ +49 4103 9308 - 99
✉ info@mut-group.com
🌐 www.mut-group.com